



CHARMGIRL

# 3 IN 1 ultrasonic skin scrubber



HK MEIZI BEAUTY EQUIPMENT CO., LTD

## - FUNZIONI DEGLI ULTRASUONI.

L'ultimo obiettivo della bellezza è quello di reintegrare l'energia e l'umidità delle cellule e delle molecole della pelle.

L'energia delle cellule della pelle è ricca di salute e vitalità, ma anche l'acqua lo è; infatti la cosmetologia ultrasuoni sfrutta l'abilità di generare energia con una forza molto intensa di decine di migliaia di hertz sulle cellule, attivando le cellule e stimolando il loro metabolismo, in modo che possano assorbire acqua dai tessuti interni o esterni, rompendo così le parti inutili e l'aria dalle cellule. Questo trattamento viene utilizzato sulla superficie della pelle per renderla sana, energica, tenera e giovane.



## - METODO DI LAVORO

L'effetto termale del macchinario e le vibrazioni ad alta frequenza accelerano i movimenti di sebo nei pori, sciolgono lo sporco e le cellule morte; le onde ultrasoniche inducono le micro esplosioni sulla superficie della pelle. Migliora la pulizia profonda senza creare fastidi, rende la pelle fresca e naturale, la superiorità di questo metodo non è paragonabile ad altri metodi. Dopo aver rimosso il trucco, questo macchinario può essere utilizzato per eliminare i residui rimasti, rendendo il viso fresco, naturale e pulito.



图 4



图 5



## - CURA DELLA PELLE

Scegliere il tipo di massaggio, pulire accuratamente il viso con acqua detergente e applicare uno strato di soluzione nutriente. Muovere il macchinario parallelamente alla pelle (figura 5), in modo che la soluzione nutriente possa essere introdotta nella pelle attraverso le onde ad ultrasuoni.

## -FUNZIONE DELLA TESTA

### **Prevenzione e controllo dell' acne:**

Quando la testa del macchinario agisce sulla pelle, può asciugare le ghiandole sudoripare, ridurre i pori e agire a livello profondo per rimuovere il sebo e altre secrezioni, reintegrando la pelle con l' effetto del detergente, dopo averla pulita dalla sporcizia e inibendo così lo sviluppo dell' acne.

Allo stesso tempo, le vibrazioni ad alta frequenza possono rimuovere l' acne già presente, distruggere le cellule morte e olii residui, aumentando anche il metabolismo della pelle.

Grazie all' effetto catalitico del trattamento, il metabolismo delle cuticole viene accelerato, aumentando le funzioni fisiologiche e raggiungendo così l' obiettivo.

### **Effetto idratante:**

Dopo aver migliorato il trasporto dei nutrienti tra i tessuti della pelle, il macchinario rende più facile il rifornimento e l' assorbimento dell' acqua tramite i massaggi delle onde meccaniche ad alta frequenza, rendendo così la pelle lucida e liscia.

### **Alleviare la tensione della pelle e prevenire la dermatite al viso:**

l' effetto del massaggio e del calore prodotti dagli ultrasuoni possono stimolare il sistema nervoso della pelle, evitando così la tensione e la dermatite al viso.

## -INTRODUZIONE DEGLI STRUMENTI



1. testa ultrasuoni

2. testa ultrasuoni per viso

3. supporto

4. schermo tempo

5. ultrasuoni e pulsante di scelta

6 scelta tempo

7. scrub per la pelle

8. Schermo intensità


9. pulsante intensità

10. pulsante intensità

11. pulsante scelta ultrasuoni e scrub

12. Pulsazioni

## -FUNZIONI DELLA TESTA

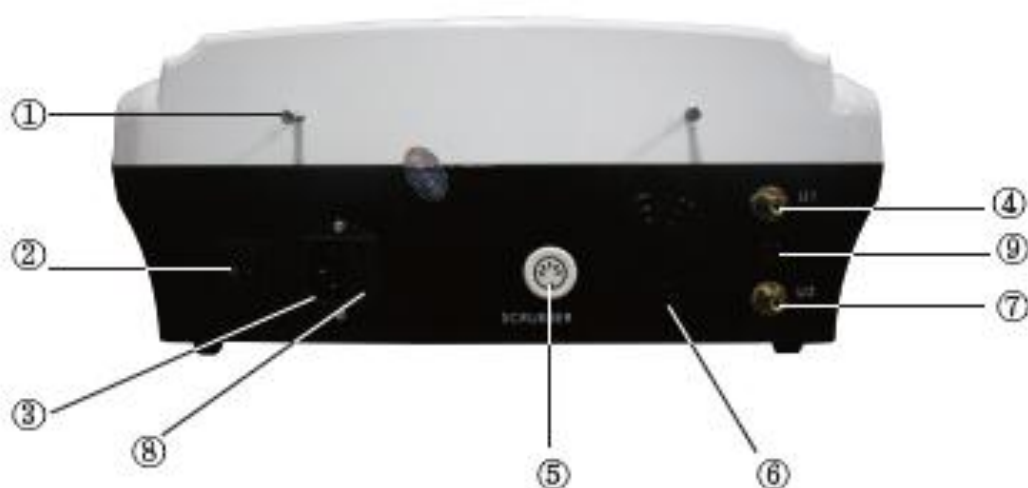

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1.vite                            | 6.dissipatore di calore          |
| 2.interruttore                    | 7.inserimento testa ultrasuoni 2 |
| 3.porta alimentatore              | 8.scatola fusibili               |
| 4. inserimento testa ultrasuoni 1 | 9.interfaccia asta negativa      |
| 5. interfaccia testa              |                                  |

## -COSMETOLOGIA ULTRASUONI

Dopo il processo di bellezza ad ultrasuoni, le cellule sono molto attive, e proprio per questo effetto riescono a metabolizzare molta sporcizia e molti scarti residui del trattamento. Inoltre viene stimolata la parte interna dei vasi linfatici tramite la circolazione, per rendere tutto più morbido e chiaro.



Il lavaggio tradizionale della pelle tramite le mani pulisce il viso ma non in profondità, infatti può lasciare dei residui nei pori. Tramite l' utilizzo degli ultrasuoni e le vibrazioni la pelle viene stimolata ad aprire i pori e tramite l' aiuto di prodotti la pulizia è completa.



I prodotti di bellezza fanno più fatica ad essere assorbiti dalla pelle se massaggiati con le mani, mentre con l' utilizzo degli ultrasuoni e delle vibrazioni del macchinario vengono assorbiti più facilmente.

## **-METODI D' UTILIZZO**

Utilizzare il pulsante del timer per scegliere il tempo del trattamento, il numero che appare è espresso in minuti. Utilizzare il pulsante per la scelta dell' intensità per scegliere quella che serve, il massimo è 8. Premere il pulsante function per accendere la luce dello scrubber mentre è in funzione. Se si vuole attivare la funzione a pulsazioni bisogna premere il pulsante dedicato, sul pannello di lavoro.

## **-UTILIZZO DELLA FUNZIONE ULTRASUONI**

Funziona come l' altro metodo, prima si regolano il tempo e l' intensità poi si seleziona la modalità ad ultrasuoni. Ci sarà un led luminoso che confermerà la funzione ultrasuoni. Per aumentare la durata del macchinario ultrasuoni il sistema ha una modalità per spegnere il macchinario.

Mentre si sta utilizzando far prendere il mano al paziente l' asta del cavo negativo, successivamente cominciare il trattamento, a questo punto comincia a funzionare immediatamente, mentre non appena si stacca dalla pelle del paziente smette di funzionare.

## **-TABELLE PARAMETRI E PACCO**

VOLTAGGIO	220V +10% 50HZ
POTENZA RICHIESTA	MENO DI 15W
POTENZA	30W
FREQUENZA	28KHZ
FREQUENZA ULTRASUONI	1MHZ
CORRENTE RICHIESTA	MENO DI 150 mA
PESO	3 KG
VOLTAGGIO IN FUNZIONE	MENO DI 60V
DIMENSIONI	6X14X30X33 cm
DIMENSIONI PACCO	35X39X19.5cm

NOME	NUMERO	NOME	NUMERO
PORTA ACCESSORI	1	PALETTA PER LA TESTA	1
TESTA ULTRASUONI PER OCCHI	1	CAVO	1
TESTA ULTRASUONI PER VISO	1	ISTRUZIONI	1
		ASTA DEL FILO NEGATIVO	1